




BEDIENUNGSANLEITUNG – DE

**IN 23094 Massagegürtel inSPORTline Petulin**

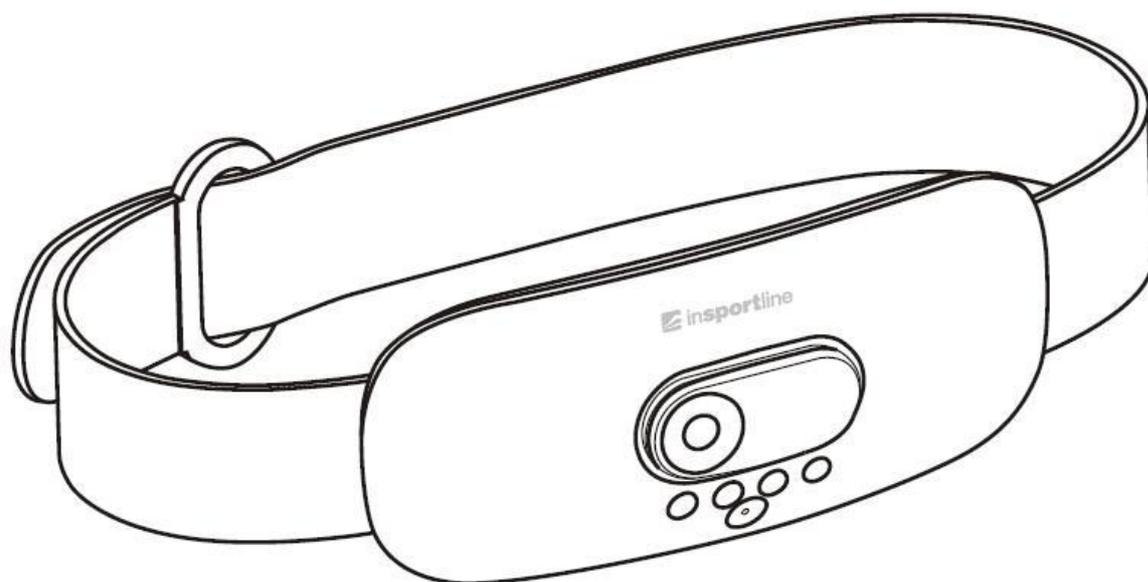


## INHALT

SICHERHEITSHINWEISE.....	3
PRODUKTBESCHREIBUNG.....	4
PACKUNGSINHALT.....	5
VERWENDEN.....	5
LADEN.....	6
BATTERIE.....	6
WARTUNG.....	6
LAGERUNG.....	6
FAQ.....	7
SPEZIFIKATIONEN.....	7
UMWELTSCHUTZ.....	8
GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN, GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE.....	8

## SICHERHEITSHINWEISE


- Lesen Sie das Handbuch vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
- Stellen Sie den Gurt auf eine angemessene Weite ein.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, es ist nicht wasserdicht.
- Wenn Sie die Position des Geräts anpassen möchten, schalten Sie es zuerst aus. Bewegen oder positionieren Sie das Gerät niemals, während es in Betrieb ist.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Es ist nicht für Kinder bestimmt.
- Wenn Sie sich krank fühlen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit lagern, laden Sie es mindestens einmal im Monat auf.
- Entfernen Sie während des Gebrauchs alle Schmuck- und Metallgegenstände vom sich selbst und dem Gerät. Elektroden können durch Kontakt mit metallischen Geräten einen Kurzschluss oder Stromschlag verursachen.
- Nicht länger als 30 Minuten ununterbrochen an einer Stelle verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie hitzeempfindlich sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Hautkrankheiten oder -verletzungen haben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie medizinische elektrische Geräte wie Herzschrittmacher usw. verwenden.
- Nicht in der Nähe anderer Geräte verwenden, die elektromagnetische oder Hochfrequenzwellen aussenden.
- Verändern oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- An einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten Gebrauch automatisch aus.
- Das Gerät dient nicht als Ersatz für eine ärztliche oder therapeutische Betreuung.
- Das Gerät ist nur für den Heimgebrauch bestimmt, es ist nicht für gewerbliche oder medizinische Zwecke geeignet.
- Das Produkt ist für Personen unter 16 Jahren nicht geeignet.
- **WARNUNG:** Das Gerät ist nicht geeignet für Benutzer mit: empfindlicher Haut, hohem oder niedrigem Blutdruck, zerebrovaskulären Erkrankungen, Tumoren, Blutungsstörungen, Entzündungen oder anderen Erkrankungen. Konsultieren Sie vor der Anwendung immer einen Arzt.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

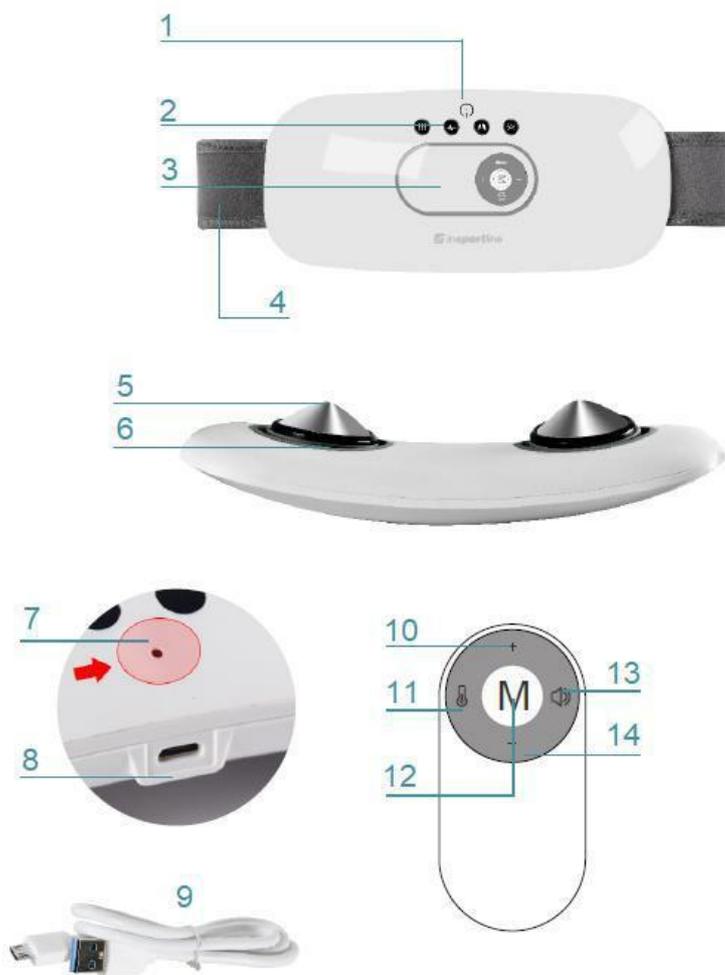


1. Power-Taste
2. Anzeige
3. Regler
4. Gurt
5. Elektroden
6. Luftkissen
7. Ladeanzeige
8. Aufladestation
9. USB-Kabel
10. Erhöhen
11. Wärme
12. Modus
13. Lautstärke
14. verringern

## PACKUNGSIHALT

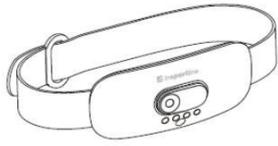

Massagegürtel

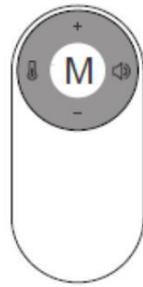

Regler



USB-Ladekabel



Handbuch

## ANWENDUNG

Befeuchten Sie die Elektroden vor Gebrauch.



Legen Sie das Massagegerät an Ihrer Taille an und passen Sie den Gurt an.



Drücken Sie zum Einschalten die M-Taste 3 Sekunden lang.



Drücken Sie die M-Taste, um den Modus zu ändern. Halten Sie zum Ausschalten die M-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.



Heizung einstellen



Geräusche anpassen



Intensität einstellen

## AUFLADEN

Wenn die Batterie schwach ist, blinkt die Anzeige rot.

Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige rot, nach dem Ladevorgang blinkt die Anzeige blau.

Ladezeit: 2 - 3 Stunden.

Das Gerät wird mit einer Lithium-Batterie betrieben. Wenn Sie das Gerät länger als 3 Monate nicht benutzen, laden Sie den Akku regelmäßig auf.

## BATTERIE

- Die Fernbedienung wird mit einer CR2032-Knopfbatterie betrieben.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie den Akku.
- Verwenden Sie keine anderen Batterien als die empfohlenen.
- Verwenden Sie den Akku nicht in einer Umgebung, in der die Temperatur 45 °C übersteigt.
- Werfen Sie die Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie zum Recycling an einer offiziellen Sammelstelle ab.

## WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.
- Reinigen Sie Verschmutzungen mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Reinigen Sie die Elektroden nach Gebrauch mit einem feuchten Handtuch oder Tuch. Bei Verschmutzung können Sie die Elektroden mit Desinfektionsmittel oder 75%igem Alkoholkonzentrat und einem weichen Tuch reinigen.

## LAGERUNG

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Von Sonnenlicht, hohen Temperaturen und feuchten Orten fernhalten.
- An einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
- Temperatur: -20 °C - 55 °C
- Luftfeuchtigkeit: <93 %
- Druck: 50 kPa - 106 kPa

## FAQ

Problem	Ursache	Lösung
Nicht möglich zu starten	Niedriger Batteriestatus	Laden Sie das Produkt auf
Laden nicht möglich / Anzeige	Das USB-Kabel ist nicht richtig angeschlossen	Schließen Sie das Kabel richtig an
	Falscher USB-Typ	Verwenden Sie das richtige USB-Kabel
Die Fernbedienung funktioniert nicht	Die Batterie ist leer	Ersetzen Sie die Batterie
Das Display funktioniert, massiert aber nicht	Die Elektroden berühren die Haut nicht	Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren
	Es befinden sich Schmutz oder Fremdkörper auf der Haut	Haut reinigen und trocknen oder Fremdkörper entfernen
Kribbeln	Die Elektroden berühren die Haut nicht direkt	Passen Sie die Größe so an, dass die Elektroden die Haut berühren
	Der Betrieb dauert zu lange	Die Betriebszeit beträgt 15 min
	Die Intensität ist hoch	Verringern Sie die Intensität
	Die Haut ist zu empfindlich	Verwenden Sie das Produkt nicht mehr
Schwache Stimulation	Die Elektroden haben keinen direkten Hautkontakt	Die Elektroden müssen die Haut berühren
	Die Elektroden sind verschmutzt	Reinigen Sie die Elektroden
	Die Intensität ist gering	Passen Sie die Intensität an

7

## SPEZIFIKATIONEN

Modell	HZ-YBB-1
Abmessungen	23 x 10,5 x 9 cm
Controller-Batterien	CR2032, Knopfatterie 3 V DC
Eingebaute Batterie	Lithium
Material	ABS + Silikon
Ladezeit	23 Stunden.
Eingang	5 V
Gewicht	400 g ± 10 g

Pulsfrequenz	2230 Hz $\pm$ 10
Wellenbreite	448 $\mu$ S
Automatische Abschaltung	15 Minuten
Umgebungsfeuchtigkeit - verwenden	<80%
Umgebungstemperatur - verwenden	+ 5 °C - +40 °C
Atmosphärischer Druck - verwenden	86 kpa – 106 kpa

## UMWELTSCHUTZ

Entsorgen Sie das Produkt nach Ablauf der Produktlebensdauer oder wenn eine eventuelle Reparatur unwirtschaftlich ist, entsprechend den örtlichen Gesetzen und umweltgerecht auf dem nächsten Schrottplatz.

Durch eine fachgerechte Entsorgung schonen Sie die Umwelt und natürliche Quellen. Darüber hinaus können Sie zum Schutz der menschlichen Gesundheit beitragen. Wenn Sie sich bei der korrekten Entsorgung nicht sicher sind, wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Gesetzesverstöße oder Sanktionen zu vermeiden.

Werfen Sie die Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie beim Wertstoffhof ab.

## GARANTIEBEDINGUNGEN, GARANTIEANSPRÜCHE

Allgemeine Garantiebedingungen und Begriffsbestimmungen

Alle hier aufgeführten Garantiebedingungen bestimmen die Garantieabdeckung und das Garantieanspruchsverfahren. Garantiebedingungen und Garantieansprüche werden durch das Gesetz Nr. 89/2012 Coll. geregelt. Bürgerliches Gesetzbuch und Gesetz Nr. 634/1992 Slg., Verbraucherschutz, in der jeweils geltenden Fassung, auch in Fällen, die nicht in diesen Garantiebestimmungen aufgeführt sind.

Verkäufer ist die SEVEN SPORT sro mit Sitz in der Strakonická-Straße 1151/2c, Prag 150 00, Firmenbuchnummer: 26847264, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht in Prag, Abteilung C, Einlage Nr. 116888.

Nach geltendem Recht kommt es darauf an, ob der Käufer Endkunde ist oder nicht.

„Der Käufer, der der Endkunde ist“ oder einfach „Endkunde“ ist die juristische Person, die den Vertrag nicht abschließt und ausführt, um ihre eigene Handels- oder Geschäftstätigkeit zu betreiben oder zu fördern.

„Der Käufer, der nicht der Endkunde ist“, ist ein Unternehmer, der Waren kauft oder Dienstleistungen in Anspruch nimmt, um die Waren oder Dienstleistungen für seine eigene Geschäftstätigkeit zu verwenden. Der Käufer stimmt dem Allgemeinen Kaufvertrag und den Geschäftsbedingungen zu.

Diese Gewährleistungs- und Gewährleistungsbedingungen sind Bestandteil jedes Kaufvertrages, der zwischen dem Verkäufer und dem Käufer geschlossen wird. Alle Garantiebedingungen sind gültig und bindend, sofern im Kaufvertrag, in der Ergänzung zu diesem Vertrag oder in einer anderen schriftlichen Vereinbarung nichts anderes bestimmt ist.

### Garantiebedingungen

#### Garantiezeit

Der Verkäufer gewährt dem Käufer eine 24-monatige Garantie auf die Warenqualität, sofern im Garantiezertifikat, der Rechnung, dem Lieferschein oder anderen Dokumenten im Zusammenhang mit den Waren nichts anderes angegeben ist. Die dem Verbraucher gewährte gesetzliche Gewährleistungsfrist bleibt unberührt.

Durch die Gewährleistung für die Warenqualität garantiert der Verkäufer, dass die gelieferten Waren für einen bestimmten Zeitraum für den regelmäßigen oder vertragsgemäßen Gebrauch geeignet sind und dass die Waren ihre regulären oder vertragsgemäßen Eigenschaften beibehalten.

Die Garantie deckt keine Mängel ab, die sich ergeben aus (falls zutreffend):

- Benutzerverschulden, dh Produktschäden, die durch unqualifizierte Reparaturarbeiten, unsachgemäße Montage, unzureichendes Einführen der Sattelstütze in den Rahmen, unzureichendes Anziehen von Pedalen und Kurbeln verursacht wurden
- Unsachgemäße Wartung
- Mechanische Schäden
- Regelmäßiger Gebrauch (z. B. Verschleiß von Gummi- und Kunststoffteilen, Bewegungsmechanismen, Gelenken, Verschleiß von Bremsbelägen/-blöcken, Kette, Reifen, Kassette/Multi-Rad usw.)
- Unvermeidbares Ereignis, Naturkatastrophe
- Anpassungen durch nicht qualifizierte Person
- Unsachgemäße Wartung, unsachgemäße Platzierung, Schäden durch niedrige oder hohe Temperaturen, Wasser, unangemessenen Druck, Stöße, absichtliche Änderungen in Design oder Konstruktion usw.

## Garantieanspruchsverfahren

Der Käufer ist verpflichtet, die vom Verkäufer gelieferte Ware sofort nach Übernahme der Verantwortung für die Ware und ihre Schäden, dh sofort nach ihrer Lieferung, zu überprüfen. Der Käufer muss die Waren prüfen, um alle Mängel zu entdecken, die bei dieser Prüfung entdeckt werden können.

Bei der Geltendmachung eines Garantieanspruchs ist der Käufer verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers den Kauf und die Gültigkeit des Anspruchs durch die Rechnung oder den Lieferschein mit der Seriennummer des Produkts oder gegebenenfalls durch die Dokumente ohne Seriennummer nachzuweisen. Wenn der Käufer die Gültigkeit des Garantieanspruchs nicht durch diese Dokumente nachweist, hat der Verkäufer das Recht, den Garantieanspruch abzulehnen.

Rügt der Käufer einen Mangel, der nicht unter die Gewährleistung fällt (z. B. bei Nichterfüllung der Gewährleistungsbedingungen oder bei irrtümlicher Mängelrüge etc.), ist der Verkäufer berechtigt, Schadensersatz zu verlangen alle durch die Reparatur entstehenden Kosten. Die Kosten werden nach der jeweils gültigen Preisliste für Dienstleistungen und Transportkosten berechnet.

Wenn der Verkäufer (durch Testen) feststellt, dass das Produkt nicht beschädigt ist, wird der Garantieanspruch nicht akzeptiert. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, eine Entschädigung für Kosten zu verlangen, die sich aus dem falschen Garantieanspruch ergeben.

Falls der Käufer einen Anspruch auf die Waren erhebt, der gesetzlich durch die vom Verkäufer gewährte Garantie abgedeckt ist, wird der Verkäufer die gemeldeten Mängel durch Reparatur oder durch Austausch des beschädigten Teils oder Produkts gegen ein neues beheben. Aufgrund der Zustimmung des Käufers hat der Verkäufer das Recht, die mangelhafte Ware gegen eine vollständig kompatible Ware mit gleichen oder besseren technischen Eigenschaften auszutauschen. Der Verkäufer ist berechtigt, die in diesem Absatz beschriebene Form des Garantieanspruchsverfahrens zu wählen.

Der Verkäufer wird den Garantieanspruch innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung der mangelhaften Ware regulieren, es sei denn, es wurde eine längere Frist vereinbart. Der Tag der Übergabe der reparierten oder ausgetauschten Ware an den Käufer gilt als Tag der Abwicklung des Garantieanspruchs. Wenn der Verkäufer aufgrund der besonderen Art des Warenmangels nicht in der Lage ist, den Gewährleistungsanspruch innerhalb der vereinbarten Frist zu erfüllen, werden er und der Käufer eine Vereinbarung über eine alternative Lösung treffen. Falls eine solche Vereinbarung nicht getroffen wird, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer einen finanziellen Ausgleich in Form einer Rückerstattung zu leisten.

10

### CZ

#### SEVEN SPORT sro

Eingetragener Sitz: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR

Hauptsitz: Dělnická 957, Vítkov, 749 01

Garantieleistungen: Čermenská 486, Vítkov 749 01

CRN: 26847264

Umsatzsteuer-ID: CZ26847264

Telefon: + 420 556 300 970

Email: eshop@insportline.cz

reklamace@insportline.cz

servis@insportline.cz

Netz: www.inSPORTline.cz

### SK

inSPORTline sro

Hauptsitz, Garantie- und Servicezentrum: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

CRN: 36311723

Umsatzsteuer-ID: SK2020177082

Telefon: + 421(0)326 526 701

Email: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk

servis@insportline.sk

Internet: www.inSPORTline.sk