



BEDIENUNGSANLEITUNG - DE

## IN 23095 Massagegerät inSPORTline Knair




# INHALT

SICHERHEITSHINWEISE.....	3
PRODUKTBESCHREIBUNG .....	4
ANZEIGE .....	4
PACKUNGSINHALT .....	5
VERWENDEN .....	5
MODI .....	5
LADEN.....	5
WARTUNG .....	6
LAGER .....	6
SPEZIFIKATIONEN.....	6
FAQ .....	6
UMWELTSCHUTZ .....	6
GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN, GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE .....	6

## SICHERHEITSHINWEISE


- Lesen Sie das Handbuch vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
- Für eine bessere Erfahrung wischen Sie die Elektroden vor dem Gebrauch mit einem feuchten Tuch ab.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, es ist nicht wasserdicht.
- Wenn Sie die Position des Geräts anpassen möchten, schalten Sie es zuerst aus. Bewegen oder positionieren Sie das Gerät niemals, während es in Betrieb ist.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Es ist nicht für Kinder bestimmt.
- Wenn Sie sich krank fühlen, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit lagern, laden Sie es mindestens einmal im Monat auf.
- Entfernen Sie während des Gebrauchs alle Schmuck- und Metallgegenstände vom Gerät. Elektroden können durch Kontakt mit metallischen Geräten einen Kurzschluss oder Stromschlag verursachen.
- Nicht länger als 30 Minuten ununterbrochen an einem Ort verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie hitzeempfindlich sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Hautkrankheiten oder -verletzungen haben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie medizinische elektrische Geräte wie Herzschrittmacher usw. verwenden.
- Nicht in der Nähe anderer Geräte verwenden, die elektromagnetische oder Hochfrequenzwellen aussenden.
- Verändern oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- An einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten Gebrauch automatisch aus.
- Das Gerät dient nicht als Ersatz für eine ärztliche oder therapeutische Betreuung.
- Das Gerät ist nur für den Heimgebrauch bestimmt, es ist nicht für gewerbliche oder medizinische Zwecke geeignet.
- Das Produkt ist für Personen unter 16 Jahren nicht geeignet.
- **WARNUNG:** Das Gerät ist nicht geeignet für Benutzer mit: empfindlicher Haut, hohem oder niedrigem Blutdruck, zerebrovaskulären Erkrankungen, Tumoren, Blutungsstörungen, Entzündungen oder anderen Erkrankungen. Konsultieren Sie vor der Anwendung immer einen Arzt.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

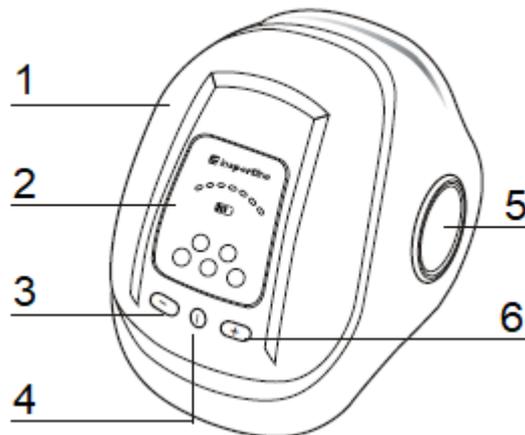

1. Massagegerät
2. Anzeige
3. Verringern
4. Power-Taste / Modus
5. Licht
6. Erhöhen

## ANZEIGE

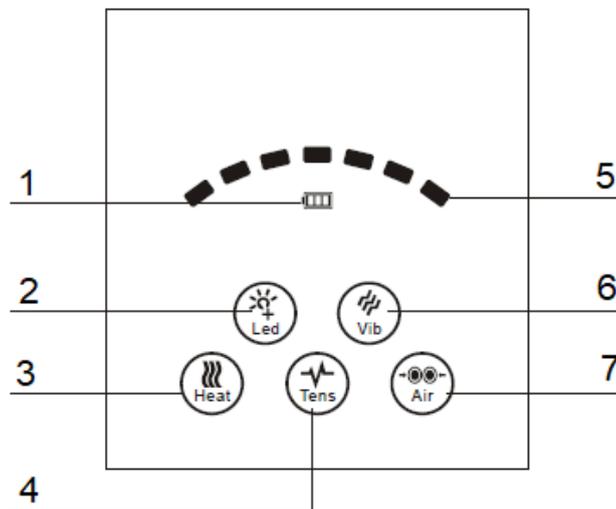

1. Batterie
2. Rotes Licht
3. Heizung
4. Pulsmassage
5. Intensität
6. Vibrationsmassage
7. Luftmassage

# PACKUNGSINHALT



Massagegerät

Elektroden

USB-Ladekabel

Handbuch

## VERWENDEN

1. Legen Sie das Massagegerät auf Ihr Knie (Bedienfeld nach oben)
2. Halten Sie die Power / Mode-Taste gedrückt, um das Gerät zu starten. Drücken Sie die Power / Mode-Taste, um den Modus zu wechseln.
3. Die Intensität kann durch Drücken von + und - in jedem Modus (14 Stufen) eingestellt werden.
4. Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten Betrieb automatisch ab.
5. Wenn die Anzeige rot zu blinken beginnt, ist die Batterie schwach, laden Sie sie bitte auf.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.

Wenn Sie Elektroden verwenden möchten, schließen Sie die Elektroden an den Anschluss an und platzieren Sie die Elektroden an der gewünschten Stelle.

## MODI

	Rotlicht	Vibrationen	Heizung	Impuls Massage	Luftmassage
Modus 1	*	*	*	*	*
Modus 2	*		*	*	*
Modus 3	*	*		*	*
Modus 4	*	*	*	*	
Modus 5	*			*	*
Modus 6	*			*	
Modus 7			*		
Modus 8					*

## AUFLADEN

- Wenn die Batterie schwach ist, blinkt die Anzeige rot.
- Schließen Sie das Ladegerät an den Anschluss an.
- Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige rot, die Anzeige leuchtet blau, wenn der Akku geladen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.

## WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus.
- Reinigen Sie Verschmutzungen mit einem trockenen, weichen Tuch.

## LAGER

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Von Sonnenlicht, hohen Temperaturen und feuchten Orten fernhalten.
- An einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.

## SPEZIFIKATIONEN

Modell	HZ-KNIE-2
Material	ABS + PMMA
Masse	745 gr
Eingang	5V 1A
Leistung	4W
Betriebszeit	15 Minuten
Betriebstemperatur	45 °C – 60 °C (±5 °C)
Umgebungstemperatur	5 °C – 40 °C
Feuchtigkeit	<80%

## FAQ

Fehler	Weil	Lösung
Einschalten nicht möglich	Batterie ist fast leer	Laden Sie das Gerät auf
Luftdruck oder Vibration zu niedrig	Batterie ist fast leer	Laden Sie das Gerät auf
Aufladen nicht möglich	Überprüfen Sie das Kabel	Versuchen Sie es mit einem neuen Kabel

## UMWELTSCHUTZ

Entsorgen Sie das Produkt nach Ablauf der Produktlebensdauer oder wenn eine eventuelle Reparatur unwirtschaftlich ist, entsprechend den örtlichen Gesetzen und umweltgerecht auf dem nächsten Schrottplatz.

Durch eine fachgerechte Entsorgung schonen Sie die Umwelt und natürliche Quellen. Darüber hinaus können Sie zum Schutz der menschlichen Gesundheit beitragen. Wenn Sie sich bei der korrekten Entsorgung nicht sicher sind, wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Gesetzesverstöße oder Sanktionen zu vermeiden.

Werfen Sie die Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie beim Wertstoffhof ab.

## GARANTIEBEDINGUNGEN, GARANTIEANSPRÜCHE

### Allgemeine Garantiebedingungen und Begriffsbestimmungen

Alle hier aufgeführten Garantiebedingungen bestimmen die Garantieabdeckung und das Garantieanspruchsverfahren. Garantiebedingungen und Garantieansprüche werden durch das Gesetz Nr. 89/2012 Coll. geregelt. Bürgerlich

Code und Act No. 634/1992 Coll., Consumer Protection, in der geänderten Fassung, auch in Fällen, die nicht in diesen Garantiebestimmungen aufgeführt sind.

Verkäufer ist die SEVEN SPORT sro mit Sitz in der Strakonická-Straße 1151/2c, Prag 150 00, Firmenbuchnummer: 26847264, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht in Prag, Abteilung C, Einlage Nr. 116888.

Nach geltendem Recht kommt es darauf an, ob der Käufer Endkunde ist oder nicht.

„Der Käufer, der der Endkunde ist“ oder einfach der „Endkunde“ ist die juristische Person, die den Vertrag nicht abschließt und ausführt, um ihre eigene Handels- oder Geschäftstätigkeit zu betreiben oder zu fördern.

„Der Käufer, der nicht der Endkunde ist“, ist ein Unternehmer, der Waren kauft oder Dienstleistungen in Anspruch nimmt, um die Waren oder Dienstleistungen für seine eigene Geschäftstätigkeit zu verwenden. Der Käufer stimmt dem Allgemeinen Kaufvertrag und den Geschäftsbedingungen zu.

Diese Gewährleistungs- und Gewährleistungsbedingungen sind Bestandteil jedes Kaufvertrages, der zwischen dem Verkäufer und dem Käufer geschlossen wird. Alle Garantiebedingungen sind gültig und bindend, sofern im Kaufvertrag, in der Ergänzung zu diesem Vertrag oder in einer anderen schriftlichen Vereinbarung nichts anderes bestimmt ist.

## **Garantiebedingungen**

### **Garantiezeit**

Der Verkäufer gewährt dem Käufer eine 24-monatige Garantie auf die Warenqualität, sofern im Garantiezertifikat, der Rechnung, dem Lieferschein oder anderen Dokumenten im Zusammenhang mit den Waren nichts anderes angegeben ist. Die dem Verbraucher gewährte gesetzliche Gewährleistungsfrist bleibt unberührt.

Durch die Gewährleistung für die Warenqualität garantiert der Verkäufer, dass die gelieferten Waren für einen bestimmten Zeitraum für den regelmäßigen oder vertragsgemäßen Gebrauch geeignet sind und dass die Waren ihre üblichen oder vertragsgemäßen Eigenschaften beibehalten.

### **Die Garantie deckt keine Mängel ab, die sich ergeben aus (falls zutreffend):**

- Benutzerverschulden, dh Produktschäden, die durch unqualifizierte Reparaturarbeiten, unsachgemäße Montage, unzureichendes Einführen der Sattelstütze in den Rahmen, unzureichendes Anziehen von Pedalen und Kurbeln verursacht wurden
- Unsachgemäße Wartung
- Mechanische Schäden
- Regelmäßiger Gebrauch (z. B. Verschleiß von Gummi- und Kunststoffteilen, Bewegungsmechanismen, Gelenken, Verschleiß von Bremsbelägen/-blöcken, Kette, Reifen, Kassette/Multi-Rad usw.)
- Unvermeidbares Ereignis, Naturkatastrophe
- Anpassungen durch nicht qualifizierte Person
- Unsachgemäße Wartung, unsachgemäße Platzierung, Schäden durch niedrige oder hohe Temperaturen, Wasser, unangemessenen Druck, Stöße, absichtliche Änderungen in Design oder Konstruktion usw.

### **Garantieanspruchsverfahren**

Der Käufer ist verpflichtet, die vom Verkäufer gelieferte Ware sofort nach Übernahme der Verantwortung für die Ware und ihre Schäden, dh sofort nach ihrer Lieferung, zu überprüfen. Der Käufer muss die Waren prüfen, um alle Mängel zu entdecken, die bei dieser Prüfung festgestellt werden können.

Bei der Geltendmachung eines Garantieanspruchs ist der Käufer verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers den Kauf und die Gültigkeit des Anspruchs durch die Rechnung oder den Lieferschein mit der Seriennummer des Produkts oder gegebenenfalls durch die Dokumente ohne Seriennummer nachzuweisen. Wenn der Käufer die Gültigkeit des Garantieanspruchs nicht durch diese Dokumente nachweist, hat der Verkäufer das Recht, den Garantieanspruch abzulehnen.

Rügt der Käufer einen Mangel, der nicht unter die Gewährleistung fällt (z. B. bei Nichterfüllung der Gewährleistungsbedingungen oder bei irrtümlicher Mängelrüge etc.), ist der Verkäufer berechtigt, Schadensersatz zu verlangen alle durch die Reparatur entstehenden Kosten. Die Kosten werden nach der jeweils gültigen Preisliste für Dienstleistungen und Transportkosten berechnet.

Wenn der Verkäufer (durch Testen) feststellt, dass das Produkt nicht beschädigt ist, wird der Garantieanspruch nicht akzeptiert. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, eine Entschädigung für Kosten zu verlangen, die sich aus dem falschen Garantieanspruch ergeben.

Falls der Käufer einen Anspruch auf die Waren erhebt, der gesetzlich durch die vom Verkäufer gewährte Garantie abgedeckt ist, wird der Verkäufer die gemeldeten Mängel durch Reparatur oder durch Austausch des beschädigten Teils oder Produkts gegen ein neues beheben. Aufgrund der Zustimmung des Käufers hat der Verkäufer das Recht, die mangelhafte Ware gegen eine vollständig kompatible Ware mit gleichen oder besseren technischen Eigenschaften auszutauschen. Der Verkäufer ist berechtigt, die in diesem Absatz beschriebene Form des Garantieanspruchsverfahrens zu wählen.

Der Verkäufer wird den Garantieanspruch innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung der mangelhaften Ware regulieren, es sei denn, es wurde eine längere Frist vereinbart. Der Tag der Übergabe der reparierten oder ausgetauschten Ware an den Käufer gilt als Tag der Abwicklung des Garantieanspruchs. Wenn der Verkäufer aufgrund der besonderen Art des Warenmangels nicht in der Lage ist, den Gewährleistungsanspruch innerhalb der vereinbarten Frist zu erfüllen, werden er und der Käufer eine Vereinbarung über eine alternative Lösung treffen. Falls eine solche Vereinbarung nicht getroffen wird, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer einen finanziellen Ausgleich in Form einer Rückerstattung zu leisten.

## **CZ** **SIEBEN SPORT sro**

Eingetragener Sitz: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Hauptsitz: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Garantieleistungen: Čermenská 486, Vítkov 749 01

CRN: 26847264  
UMSATZSTEUER-ID: CZ26847264

Telefon: + 420 556 300 970  
Email: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Netz: www.inSPORTline.cz

## **SK** **inSPORTline sro**

Hauptsitz, Garantie- und Servicezentrum: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

CRN: 36311723  
UMSATZSTEUER-ID: SK2020177082

Telefon: + 421(0)326 526 701  
Email: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Netz: www.inSPORTline.sk