



BEDIENUNGSANLEITUNG - DE
IN 23199 Ultraschall-Massagegerät inSPORTline Valeri


Inhalt

Sicherheitshinweise.....	3
Produktbeschreibung.....	3
Verwendung der Ultraschallmassage	4,5
Verwendung – EMS	5,6
Tipps zur Elektrodenplatzierung	6,7
Heizfunktion	8
Nach Gebrauch	8
Umweltschutz.....	8
Garantiebedingungen, Reklamation	8,9,10,11

Sicherheitshinweise


- Lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel heiß oder der Stecker beschädigt ist.
- Von Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
- Das Gerät ist kein Spielzeug, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Bewegen Sie die Elektroden nicht und lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht von einer anderen Person berühren.
- Platzieren Sie die Elektroden nicht auf den Augenlidern, der Stirn, der Brust oder in der Nähe des Herzens.
- Nicht geeignet für: Schwangere, Personen mit Infektionen, Hauterkrankungen, Träger von Herzschrittmachern oder anderen elektrischen Geräten usw.
- Stellen Sie das Gerät immer auf die niedrigste Intensität, bevor Sie es starten oder ausschalten.
- **WARNUNG:** Das Gerät ist kein Ersatz für medizinische oder therapeutische Behandlung.

Produktbeschreibung

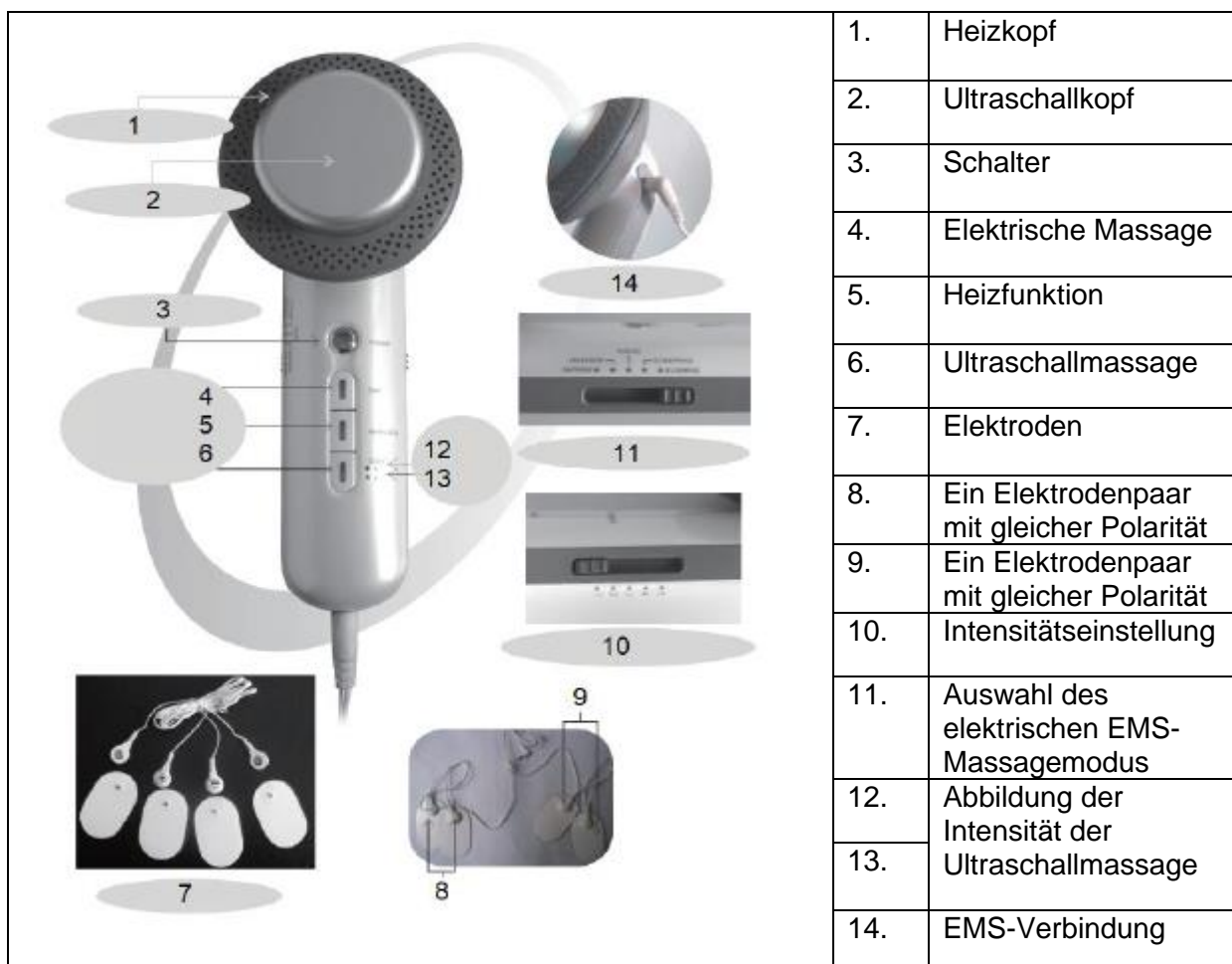

Verwendung der Ultraschallmassage

1. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
2. Gerät starten. Die rote Anzeige leuchtet

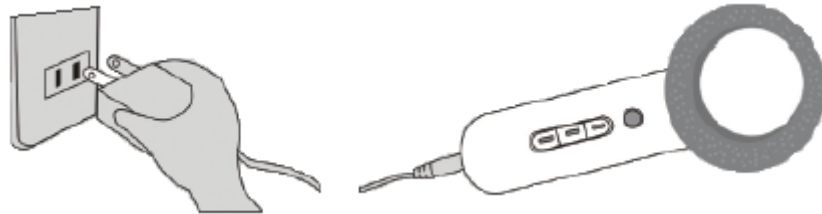

3. Drücken Sie die SONIC-Taste. Das Gerät startet mit der niedrigsten Intensität. Um die Intensität zu erhöhen, drücken Sie wiederholt die SONIC-Taste. Für empfindlichere Bereiche empfehlen wir eine niedrige Intensität.
4. Cremens Sie massierte Bereiche ein, um Austrocknung vorzubeugen.



5. Creme auf den Massagekopf auftragen.
6. Gerät kann verwendet werden.

WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht an Hals, Augenlidern, Augen, Gelenken oder Knochen.



Verwendung – EMS

1. Reinigen Sie die notwendige Körperstelle mit einem feuchten Tuch von Fett, Creme und weiteren Rückständen.
2. Verbinden Sie die Elektroden mit den Kabeln und platzieren Sie dann die positiven und negativen Elektroden an verschiedenen Körperteilen.



3. Stellen Sie die Intensität auf den niedrigsten Wert ein.
4. Schließen Sie die Kabel an das Gerät an.
5. Starten Sie das Gerät (rote LED leuchtet).
6. Wählen Sie die Art der Massage (klopfen, massieren, kneten, schaben, abnehmen/klopfen, massieren, kneten, kratzen, brennen).
7. Drücken Sie die EMS-Taste.
8. Stellen Sie die Intensität auf einen von 5 Werten ein.
9. Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten Betrieb automatisch ab.
10. Wir empfehlen, mit 10 Minuten zu beginnen und höchstens auf maximal 30 Minuten zu erhöhen.
11. Wenn Sie fertig sind, schalten Sie den ausgewählten Modus aus und stellen Sie die Intensität auf den niedrigsten Wert ein.





Tipps zur Elektrodenplatzierung

WARNUNG: Die folgenden Elektrodenpositionen dienen nur zur Orientierung und sind nicht für medizinische oder medizinische Zwecke bestimmt.

Akupunkturpunkte und Massagearten werden im Folgenden beschrieben:

klopfen/Tapping

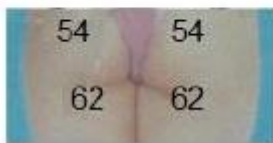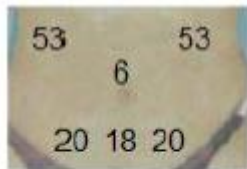

Bauchstraffung:

(20): Shuidao

(6): Shuifen

(18): Guanyuan

(53): Zhishi

Hüftverstärkung:

(54): Huanziao

(62): Chengfu

Massage



Tailenverstärkung:

(10): Tianshu

(7): Taiyi

(17): Daimai

(47): Shenyu

Kneten/ Kneading



Bauchformung:

(18): Guanyuan

(48): Dachangyu

(8): Zhongyuan

Kratzen / Scrapping



Hautunterstützung:

(44): Feiyu

(45): Gangyu

Fettverbrennung / Slimming



Fettverbrennung:

(42): Dazhui

(52): Yangguan

(8): Zhongyuan

(18): Guanyuan

(22): Juliao

(47): Shenyu

(62): Chengfu

Heizfunktion

Um mit dem Heizen zu beginnen, starten Sie das Gerät und drücken Sie die INFRAROT-Taste. Nach einer Minute erwärmt sich das Gerät. Schauen Sie beim Erhitzen nicht in das Infrarotlicht.

Nach Gebrauch

1. Stellen Sie sicher, dass alle Funktionen deaktiviert sind.
2. Schalten Sie das Gerät aus.
3. Trennen Sie die Elektroden und bewahren Sie sie sicher auf.
4. Wischen Sie den Massagekopf und die Elektroden mit einem feuchten Tuch ab.
5. Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel.
6. Bewahren Sie das Gerät in der Box auf.

Umweltschutz

Entsorgen Sie das Produkt am Ende der Lebensdauer des Produkts oder wenn eine weitere Reparatur wirtschaftlich nachteilig wäre, gemäß den örtlichen Vorschriften und auf umweltfreundliche Weise. Bringen Sie das Produkt zur nächstgelegenen Sammelstelle.

Wenn Sie es ordnungsgemäß entsorgen, tragen Sie zur Erhaltung wertvoller natürlicher Ressourcen bei und verhindern negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an die zuständigen Behörden vor Ort, um Verstöße und nachfolgende Sanktionen zu vermeiden.

Werfen Sie die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll weg, sondern geben Sie sie an einer offiziellen Sammelstelle zum Recycling ab.

GARANTIEBEDINGUNGEN, BESCHWERDEN

Allgemeine Bestimmungen und Definitionen

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren regeln die Bedingungen und den Umfang der vom Verkäufer gewährten Garantie für die an den Käufer gelieferte Ware, sowie das Verfahren zur Begleichung der Reklamationsansprüche des Käufers für die gelieferte Ware. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren unterliegen den einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 89/2012 Coll., Des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des Gesetzes Nr. 634/1992 Coll. Über den Verbraucherschutz in der jeweils gültigen Fassung, auch in Angelegenheiten, die unter diese Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren fallen. unerwähnt.

Verkäufer ist SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz in Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, eingetragen im Handelsregister des Landgerichts in Prag, Abschnitt C, Beilage 116888.

Aufgrund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen wird zwischen einem Käufer, der Verbraucher ist und einem Käufer, der kein Verbraucher ist, unterschieden.

"Käufer-Verbraucher" oder einfach "Verbraucher" ist eine Person, die beim Abschluss und bei der Ausführung eines Vertrags nicht im Rahmen ihres Handels oder Geschäfts handelt.

"Ein Käufer, der kein 'Verbraucher' ist, ist ein Unternehmer, der Produkte kauft oder Dienstleistungen für den Zweck seines Geschäfts mit diesen Produkten oder Dienstleistungen nutzt. Dieser Käufer unterliegt dem für ihn geltenden Rahmenkaufvertrag und den Geschäftsbedingungen.

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren sind Bestandteil jedes zwischen Verkäufer und Käufer geschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren sind gültig und bindend, sofern die Parteien im Kaufvertrag oder in einem Nachtrag zu diesem Vertrag oder einer anderen schriftlichen Vereinbarung nichts anderes vereinbart haben.

Garantiebedingungen

Garantiezeit

Der Verkäufer gewährt dem Käufer eine Garantie für die Qualität der Ware für einen Zeitraum von 24 Monaten, wenn von der Garantiekarte, Rechnung für die Ware, Lieferschein oder ein anderes Dokument für die Ware keine andere als vom Verkäufer angegebene

Garantiezeit angegeben wurde. Die gesetzliche Dauer der Gewährleistung bleibt hiervon unberührt.

Mit der Qualitätsgarantie übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware für einen bestimmten Zeitraum für den normalen Gebrauch geeignet ist, oder für den vereinbarten Zweck und dass es das Übliche oder vereinbarten Eigenschaften enthält.

Die Garantiebedingungen gelten nicht für verursachte Mängel (falls zutreffend für das gekaufte Produkt):

- durch ein Verschulden des Benutzers, d.h. Beschädigung des Produkts durch unprofessionelle über Handhabe, fehlerhafte Montage, unzureichendes Einsetzen der Sattelstütze in den Rahmen, unzureichendes Anziehen der Pedale in den Griffen und Griffen zur Mittelachse
- unsachgemäße Wartung
- mechanischer Schaden
- Verschleiß von Teilen während des normalen Gebrauchs (z. B. Gummi- und Kunststoffteile, Bewegungsmechanismen, Gelenkverbindungen usw.)
- ein unvermeidbares Ereignis, eine Naturkatastrophe
- unprofessionelle Interventionen
- unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäße Platzierung, niedrige oder hohe Temperatur, Wasser, übermäßiger Druck und Stöße, absichtlich veränderte Konstruktion, Form oder Abmessungen

Garantiverfahren

Verfahren zur Geltendmachung eines Warenmangels

Der Käufer ist verpflichtet, die vom Verkäufer gelieferte Ware so bald wie möglich nach Erhalt der Ware auf Beschädigung zu prüfen. Die Inspektion muss vom Käufer so durchgeführt werden, dass alle Mängel festgestellt werden, die bei einer angemessenen professionellen Inspektion festgestellt werden können.

Bei einer Reklamation der Ware ist der Käufer verpflichtet auf Verlangen des Verkäufers den Kauf und die Begründung der Reklamation durch eine Rechnung oder einen Lieferschein mit der angegebenen Produktionsnummer (Seriennummer) oder denselben Unterlagen ohne Seriennummer nachzuweisen. Wenn der Käufer mit diesen Unterlagen die Rechtmäßigkeit der Beschwerde nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Beschwerde abzulehnen.

Wenn der Käufer einen Mangel meldet, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist (z. B. wurden die Garantiebedingungen nicht erfüllt, der Mangel wurde versehentlich gemeldet usw.), ist der Verkäufer berechtigt die vollständige Erstattung der Kosten zu verlangen welche sich im Zusammenhang mit der Beseitigung des vom Käufer gemeldeten Mangels ergeben haben. In diesem Fall basiert die Berechnung des Service-Eingriffs auf der gültigen Preisliste der Arbeitsleistung und der Transportkosten.

Wenn der Verkäufer (durch Testen) feststellt, dass das beanspruchte Produkt nicht fehlerhaft ist, gilt der Anspruch als ungerechtfertigt. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Zahlung von Kosten zu verlangen, die im Zusammenhang mit einer ungerechtfertigten Beschwerde anfallen.

Für den Fall, dass sich der Käufer über Mängel an der von der Garantie abgedeckten Ware gemäß den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers beschwert, wird der Verkäufer den Mangel beseitigen, indem er das defekte Teil oder die defekte Ausrüstung durch ein fehlerfreies repariert oder ersetzt. Mit Zustimmung des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, im Austausch gegen die fehlerhafte Ware ein anderes voll funktionsfähiges Produkt zu liefern. Dieses besitzt mindestens die gleichen oder bessere technische Parameter. Die Wahl bezüglich der Art und Weise der Bearbeitung der Beschwerde gemäß diesem Absatz liegt beim Verkäufer.

Der Verkäufer wird die Reklamation spätestens 30 Tage nach Lieferung der fehlerhaften Ware bearbeiten, es sei denn, es wurde eine längere Frist vereinbart. Als Abrechnungstag gilt der Tag, an dem die reparierte oder ersetzte Ware dem Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer die Reklamation aufgrund der Art des Mangels nicht innerhalb der angegebenen Frist bearbeiten kann, wird er mit dem Käufer eine alternative Lösung vereinbaren. Wird keine solche Einigung erzielt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Entschädigung in Form einer Gutschrift zu gewähren.

CZ
SEVEN SPORT GmbH

Sitz
Hauptsitz:
Reklamation und Service:

Strakonická 1151 / 2c, Prag 5, 150 00, CZ
Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO:
Steuernummer:

26847264
CZ26847264

Tel.:
Mail:

+420 556 300 970
eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web:

www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline GmbH

Hauptsitz, Reklamation, Service:

Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO:

36311723

Steuernummer:

SK2020177082

Tel.:

+421(0)326 526 701

Mail:

objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk

servis@insportline.sk

Web:

www.inSPORTline.sk

Verkaufsdatum:

Stempel und Unterschrift des Verkäufers: